

M

Manuel technique Winoptics²

Installation et migration
Winoptics vers Winoptics²

TOUTES VERSIONS

Winoptics



SOMMAIRE

I. Configuration matérielle préconisée	3
II. Passage à Winoptics²	3
III. Pré-requis	4
IV. Installation de Winoptics²	4
V. Récupération des données de Winoptics	7
VI. Validation du passage à Winoptics²	10
VII. Mise en place des Paramétrages de Base	11
VIII. Installation du Winoptics2LocalService	11

I. Configuration matérielle préconisée

Le système d'exploitation doit être en 64 bits et supporté par Microsoft : tel que Windows 11.


Attention : ne sont plus supportés par Microsoft : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

Une résolution écran minimale de 1366x768 est nécessaire pour utiliser le logiciel. Un écran full HD est cependant préférable pour une utilisation optimale.

Pour installer le logiciel Winoptics² sur votre ordinateur, il vous faudra au minimum 8 Go de RAM et un disque SSD sur votre serveur.


II. Passage à Winoptics²

Dans un premier temps, vous recevrez l'email suivant :

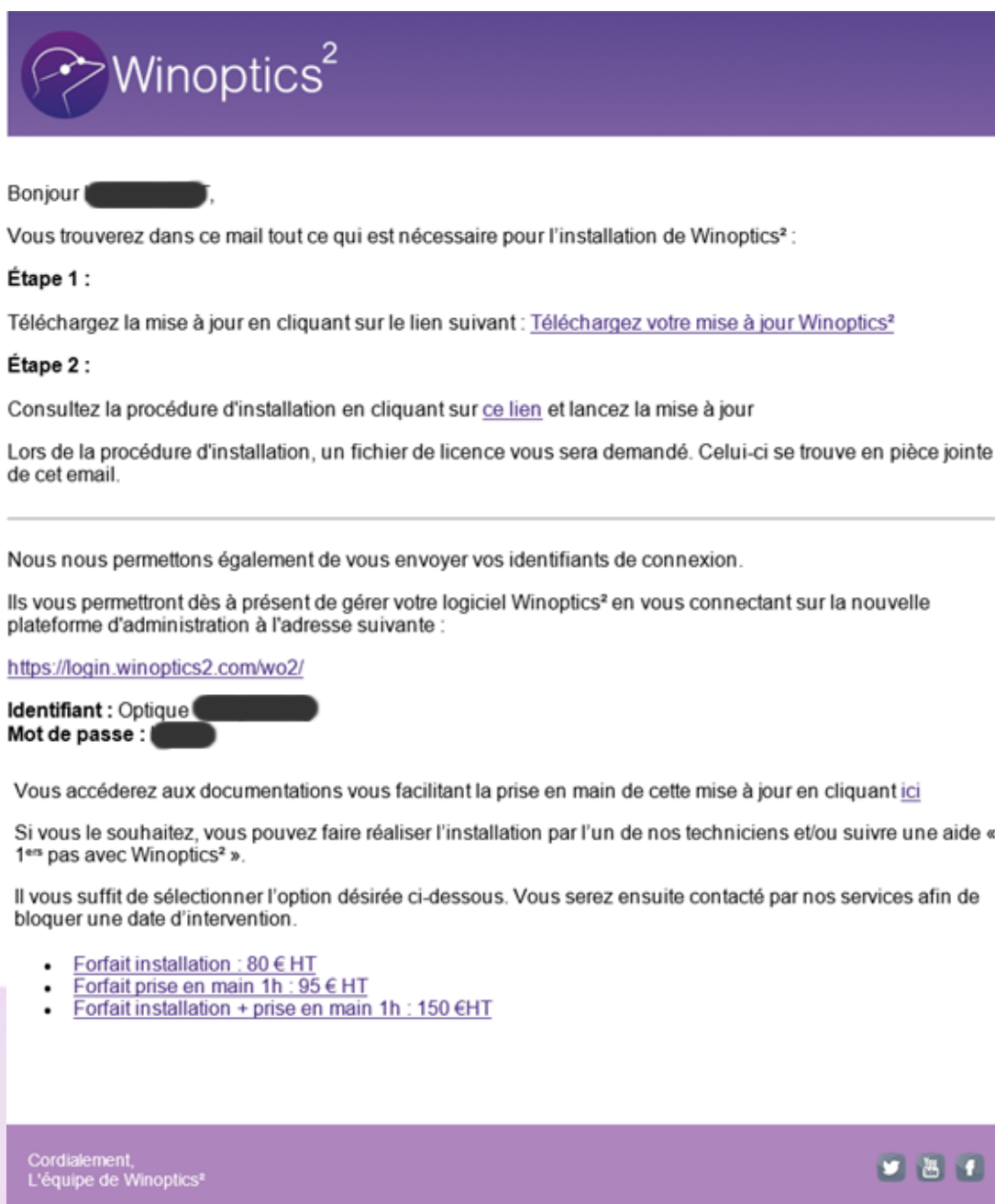

III. Pré-requis



Pour poursuivre l'installation de Winoptics², il est admis que :

- Vous avez reçu le mail de confirmation de licence Winoptics² contenant le fichier de licence et le lien de téléchargement de l'application permettant l'installation,
- Vous avez copié le fichier de licence (xxxx-license.txt) sur le poste où doit se faire l'installation et téléchargé l'application d'installation ( Winoptics2-setup.exe) sur ce même poste.

IV. Installation de Winoptics²

Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation :  Winoptics2-setup.exe

Cliquez sur « Suivant » sur les 2 premiers écrans :

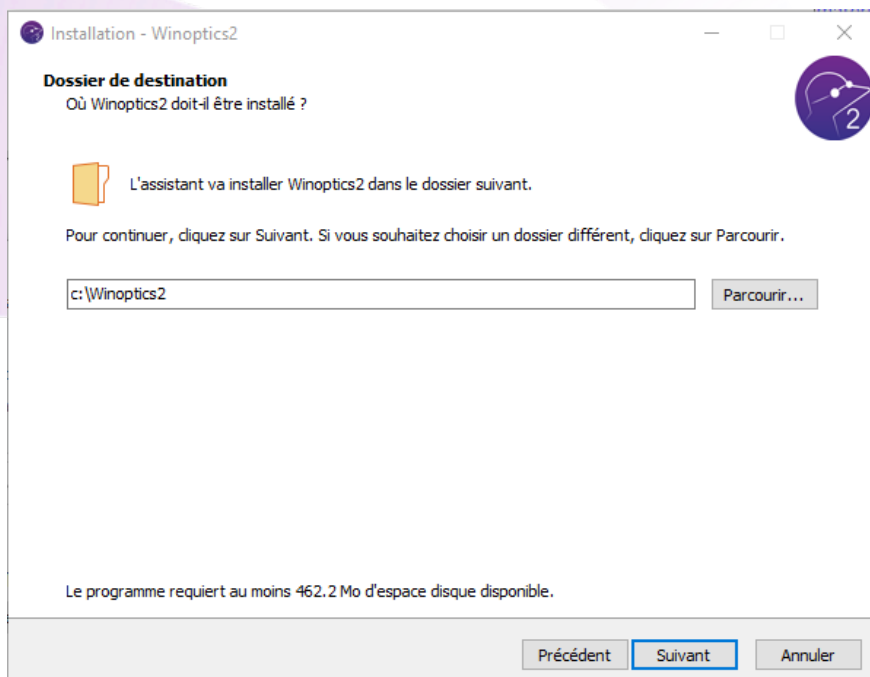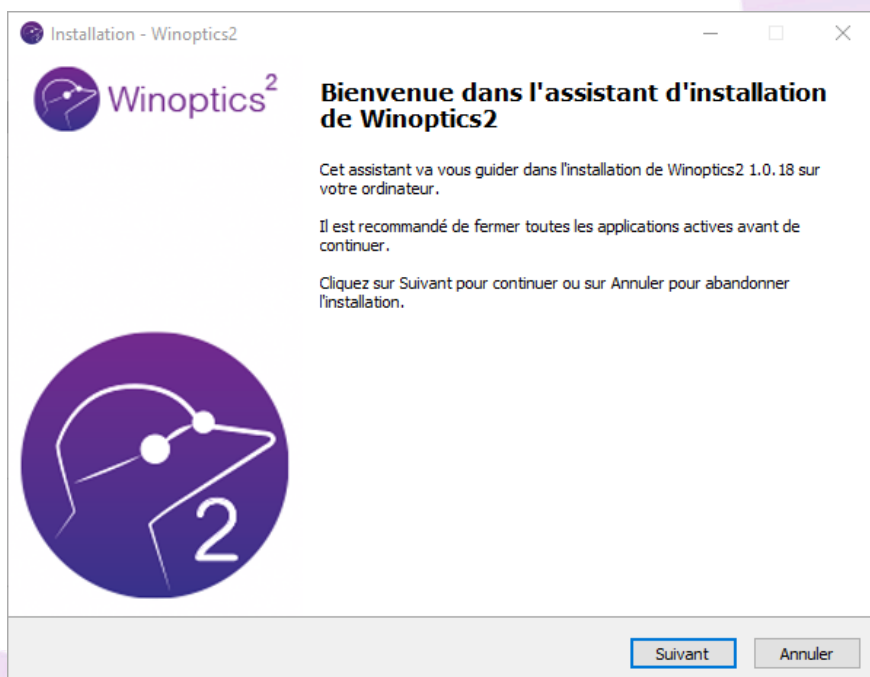

Cliquez sur « Parcourir » pour rechercher le fichier de licence (xxxxx-licence.txt) enregistré au préalable sur le disque à partir du mail de confirmation reçu.

Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Saisissez alors les informations de l'Administrateur :

- ses nom et prénom,
- son nom d'utilisateur,
- son mot de passe.

Ils seront utilisés pour le lancement de Winoptics².

Un récapitulatif de la demande d'installation apparaît :

Cliquez sur « Installer » pour lancer l'installation du programme.

Installation - Winoptics2

Sélectionnez l'emplacement du fichier de licence
Où se trouve votre fichier de licence ?

Sélectionnez le répertoire où se trouve le fichier de licence, puis cliquez sur suivant.

Emplacement du fichier de licence:

Parcourir...

Précédent Suivant Annuler

Installation - Winoptics2

Saisissez votre utilisateur
Cet utilisateur vous permettra de vous connecter à votre logiciel Winoptics2.

Entrez votre Nom:

Entrez votre Prénom:

Entrez votre nom d'utilisateur:

Entrez votre mot de passe: ☐ Afficher/Masquer

Confirmez votre mot de passe: ☐ Afficher/Masquer

Précédent Suivant Annuler

Installation - Winoptics2

Prêt à installer
L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer Winoptics2 sur votre ordinateur.

Cliquez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation.

Dossier de destination :
c:\Winoptics2

Version de Winoptics2 installée: 2024.1.2-4.36.1
Date de la release: 02-02-2024 17:10:29


Votre Nom est: [redacted]
Votre Prénom est: [redacted]
Votre utilisateur Winoptics2 est: [redacted]
Votre mot de passe est: xxxxxxx

Votre numéro de MagId est: [redacted]
Votre numéro de licence est: [redacted]

Précédent Installer Annuler

L'installation peut durer plusieurs minutes.

La barre de défilement verte permet de visualiser l'avancement :

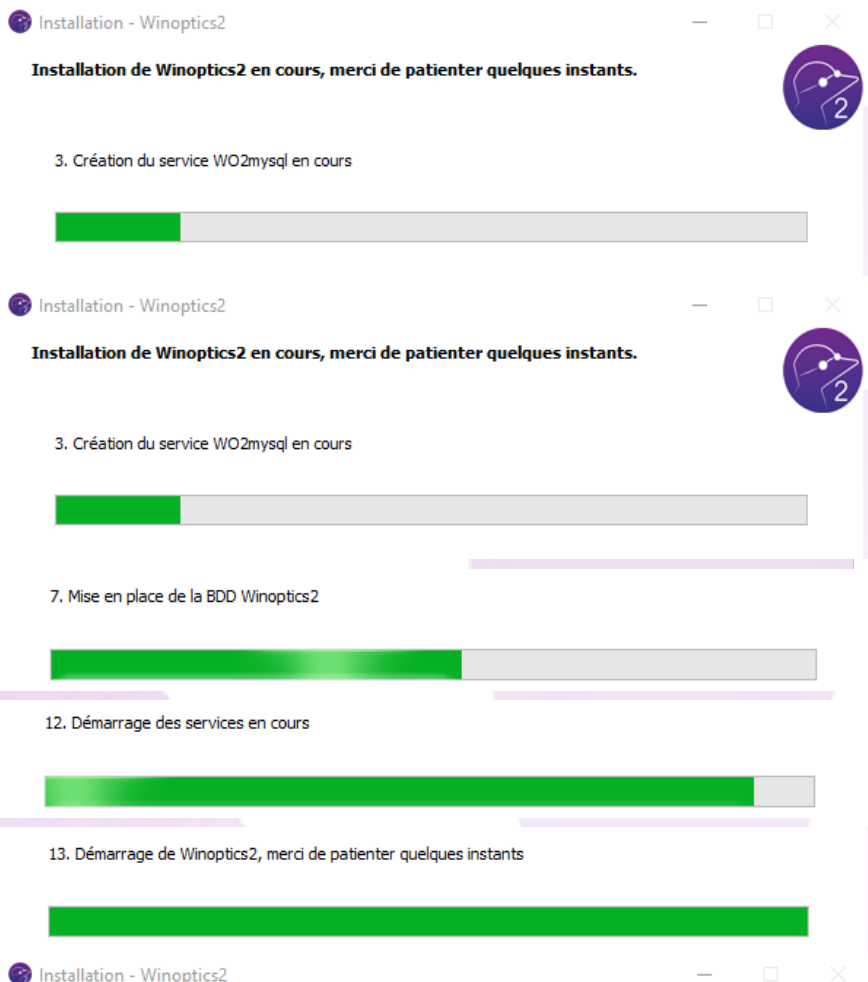

Attendre le message de fin d'installation !

Cliquez alors sur « Terminer ».



Deux icônes sont automatiquement créées sur le bureau :



L'icône « Winoptics² », permettant de lancer l'application (pour l'instant la base de données est entièrement vierge).


L'icône « WO² Maintenance », qui permet de lancer la « boîte à outils » liée au logiciel. (Pour l'accès aux sauvegardes et restauration de données entre autres choses.)




V. Récupération des données de Winoptics

La base de données (fichier client, stock, caisse, documents scannés, etc.) générée par Winoptics au fil des années peut être entièrement récupérée sur Winoptics².

- **Fermez les applications Winoptics et Winoptics².**
- Double-cliquez sur l'icône « WO² Maintenance » et cliquez sur l'onglet « Migration » :

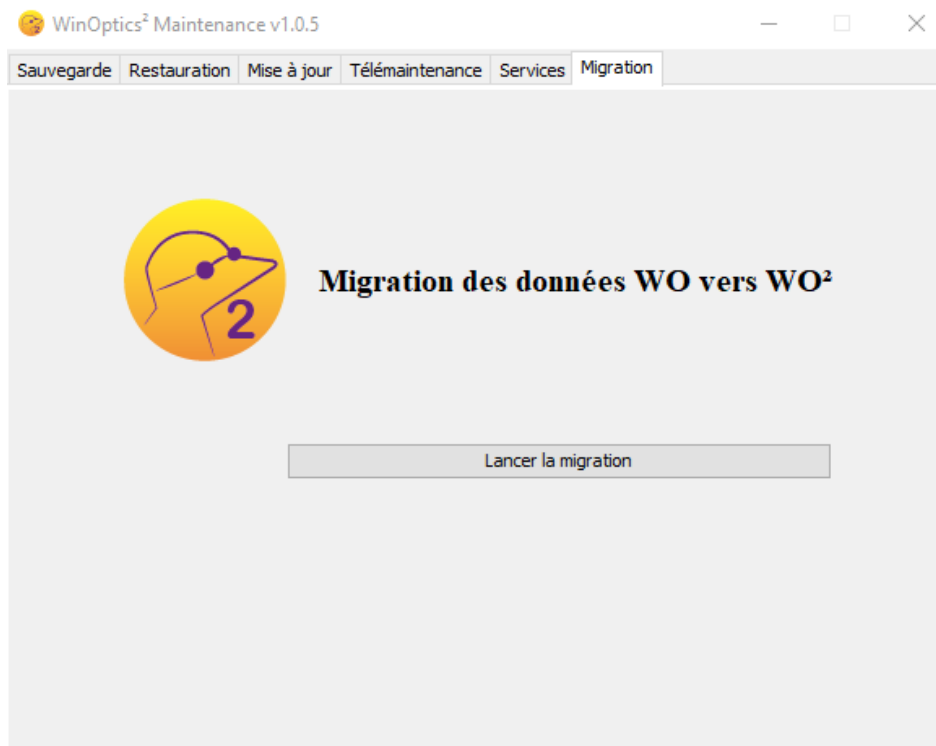

Cliquez sur le bouton « Lancer la migration ». Le message d'avertissement suivant apparaît :

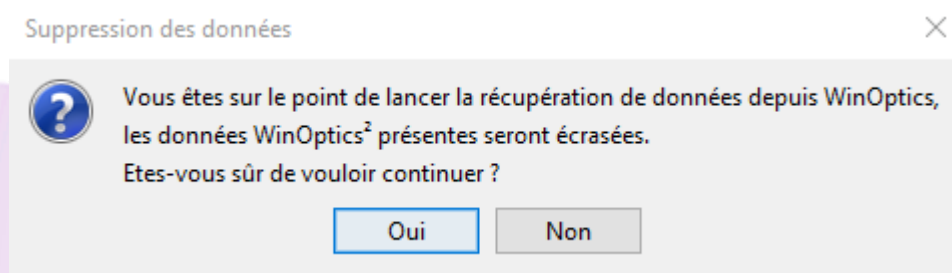


Attention, si des données ont été saisies auparavant dans Winoptics², elles seront irrémédiablement écrasées par cette opération !

Cliquez sur « oui » pour confirmer. Le traitement d'effacement des données se lance alors. Patientez quelques minutes :



L'écran suivant apparaît ensuite :

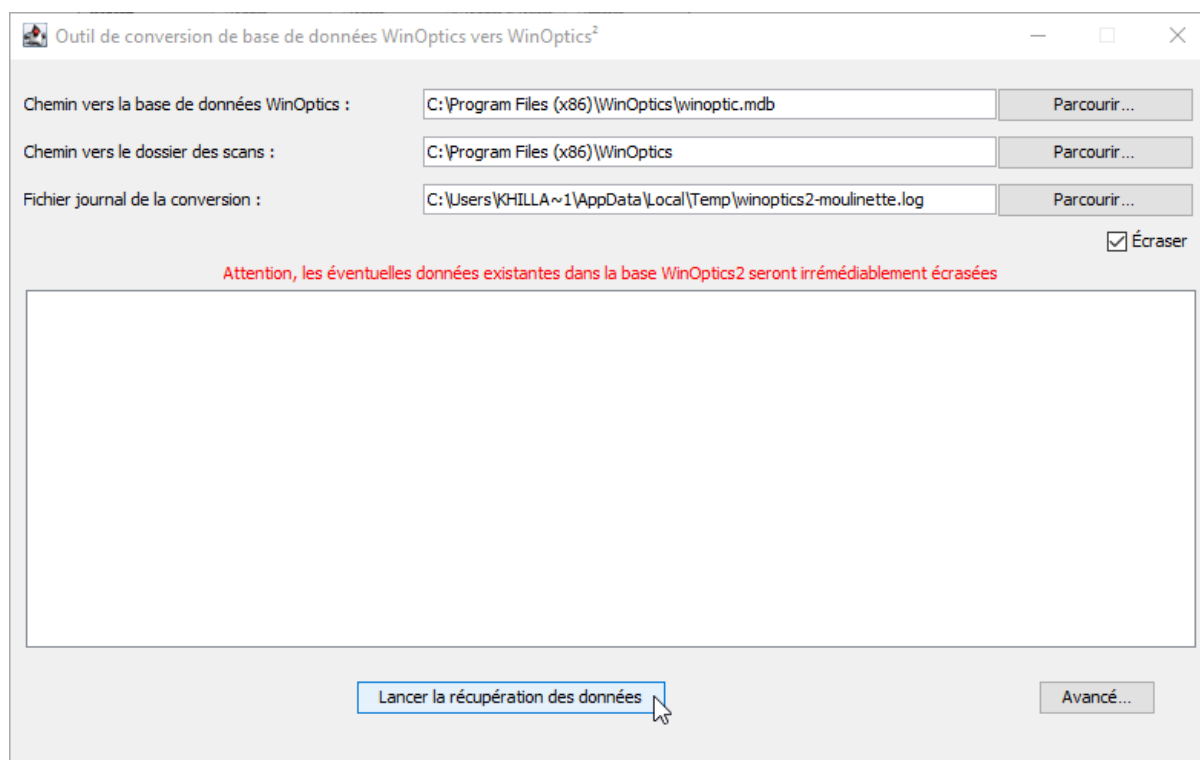

Les chemins d'accès de la base de données et des scans de Winoptics sont renseignés automatiquement (vous avez la possibilité de modifier ces chemins avec le bouton « Parcourir »).

La récupération des données de Winoptics vers Winoptics² se fait en cliquant sur le bouton « Lancer la récupération des données ».


En fonction de la taille de la base de données et de la performance de l'ordinateur, le temps nécessaire est très variable. Cela peut aller d'un quart d'heure à 2 heures.

Attention : L'accès à Winoptics ne sera pas possible pendant toute la durée du traitement.


Remarque : Aucune action n'étant nécessaire pendant le traitement, celui-ci peut être lancé pendant la pause méridienne ou le soir.

Le suivi de l'avancement se fait dans l'encart blanc de la fenêtre active.


La phase d'initialisation peut durer quelques minutes...

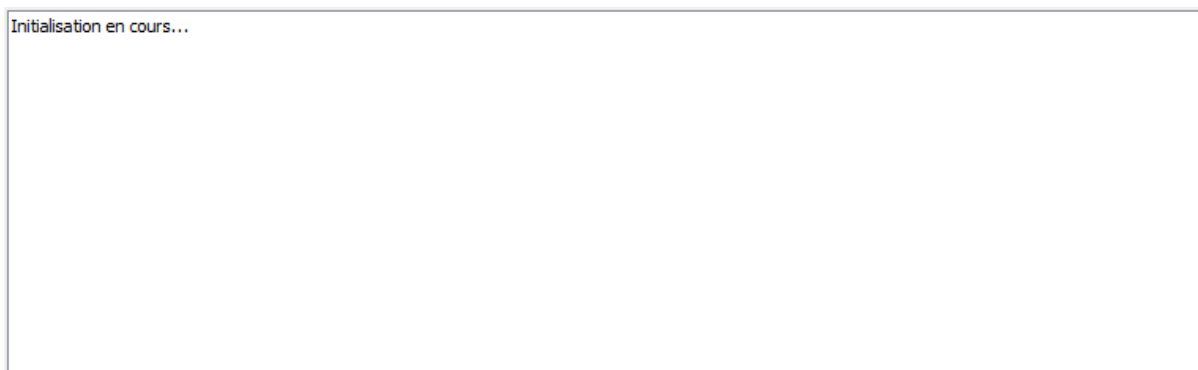

Puis les différents traitements défilent à l'écran :

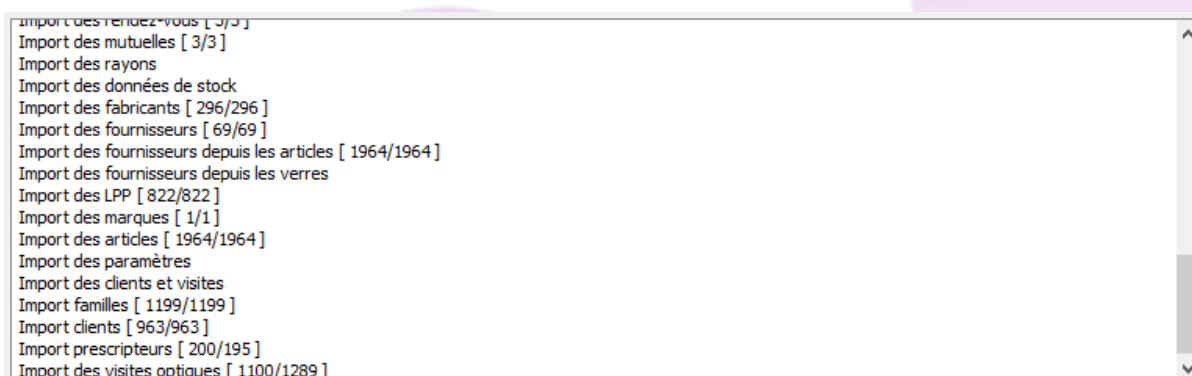

Attendez le message de Fin de l'import pour fermer la fenêtre et lancer Winoptics² :

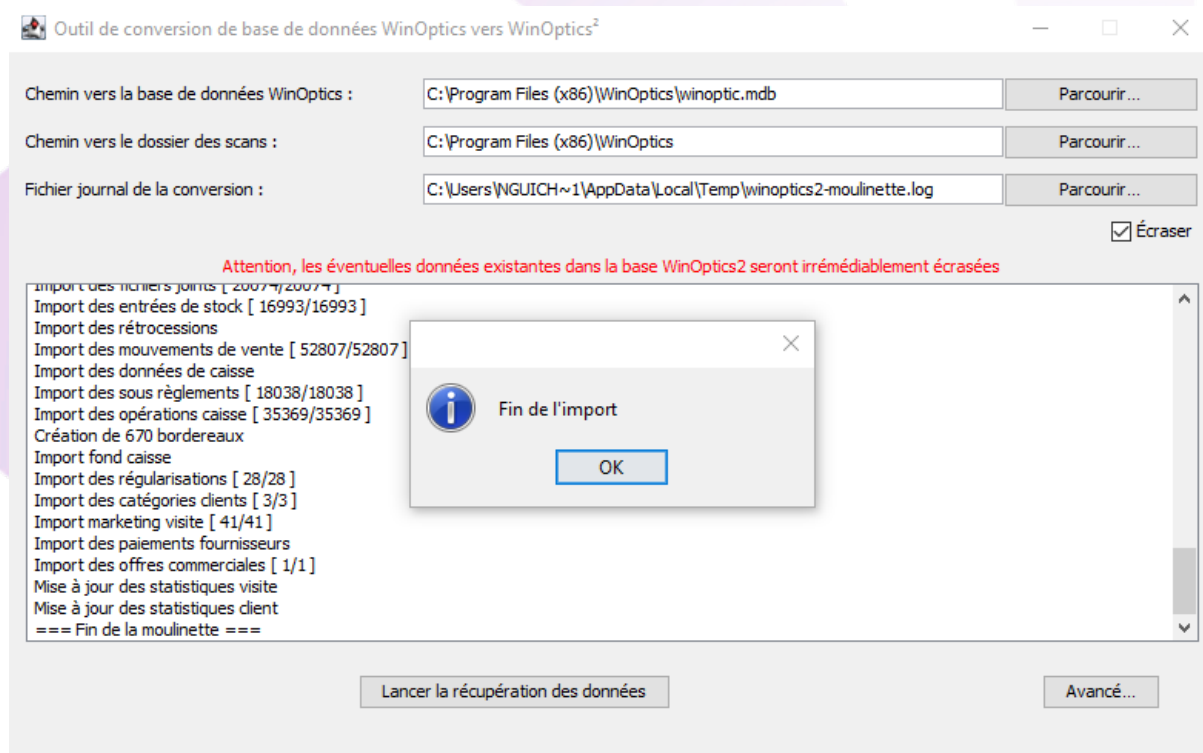


Cliquez sur « OK ».

VI. Validation du passage à Winoptics²


Les deux logiciels, Winoptics et Winoptics², peuvent cohabiter sur le même poste. Par contre seul l'un d'entre eux peut être validé comme étant le logiciel de gestion du magasin.

Un message à chaque lancement de Winoptics² vous rappellera qu'il n'est pas encore défini comme logiciel principal :

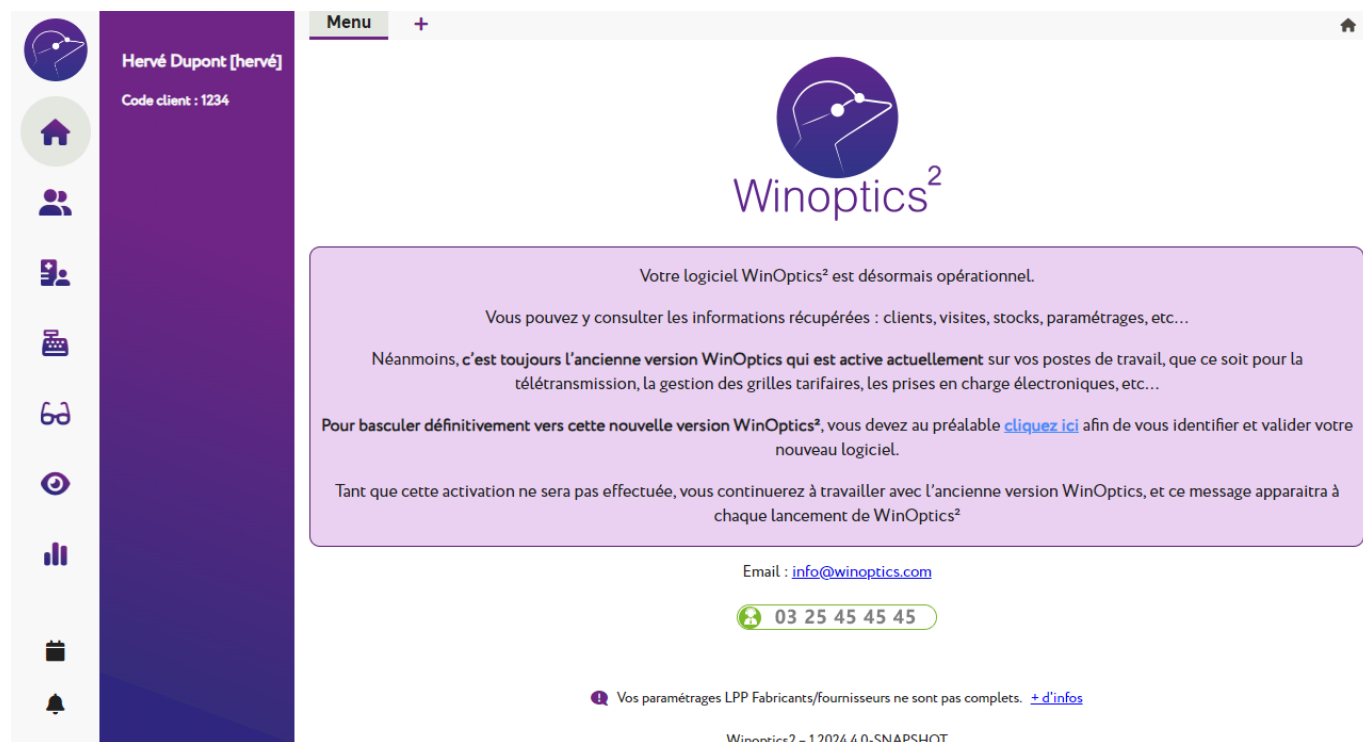

Il sera donc nécessaire de cliquer sur le lien (« [cliquez ici](#) ») de ce message pour :

- accéder à votre espace personnel Winoptics,
- vous identifier avec les codes Winoptics,
- **confirmer** le passage à Winoptics², ce qui se fait sur l'écran suivant :

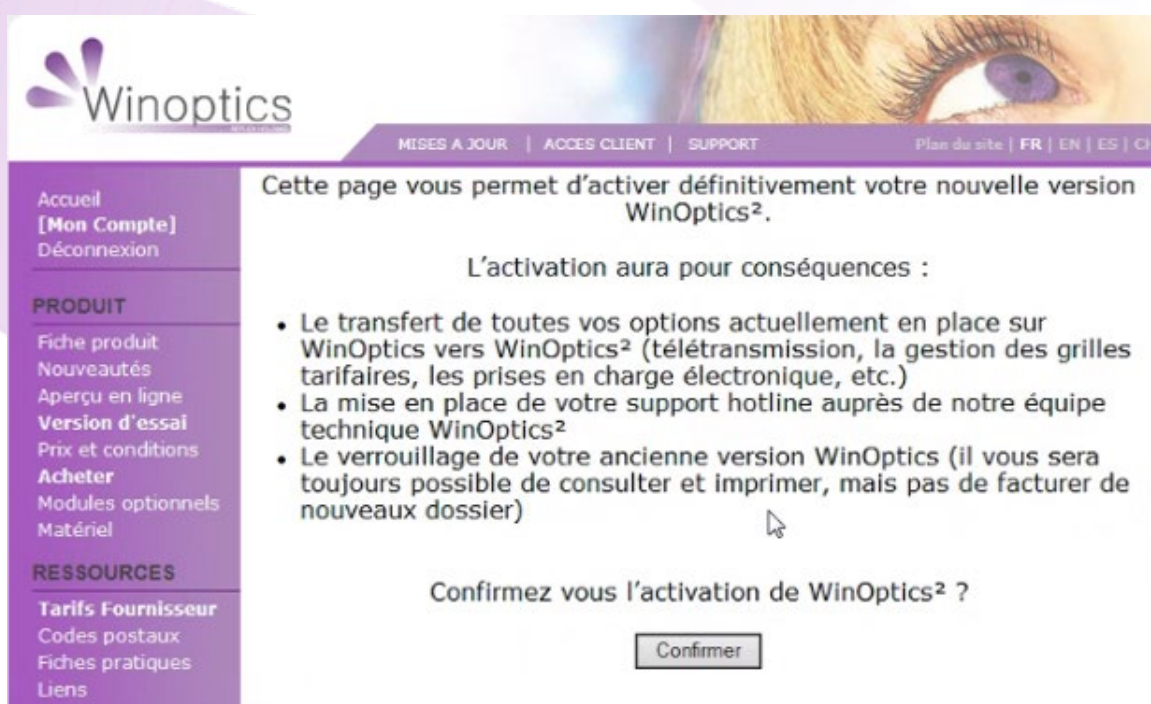

La confirmation du passage à Winoptics² aura les répercussions suivantes :

- L'ancienne version de Winoptics sera toujours accessible mais il ne sera **plus possible de** :
 - o télétransmettre,
 - o faire des prises en charge,
 - o passer des commandes EDI,
 - o facturer des dossiers.
- Les **compteurs** de SMS et PEC ainsi que les **options** (télétransmission, grilles tarifaires, etc.) seront automatiquement transférés sur le nouveau compte Winoptics².
- Vos identifiants de connexion pour Winoptics² (reçus dans l'e-mail de migration) deviendront actifs pour l'accès à votre nouvel espace personnel.

VII. Mise en place des Paramétrages de Base


Pour le bon fonctionnement du magasin suite au passage à Winoptics², il est nécessaire de penser à vérifier ou effectuer quelques paramètres de base :

- Les vendeurs (rôle, mot de passe et signature),
- Les périphériques (détection et paramétrage des imprimantes et scanner, configuration d'un LCV),
- Le cadrage d'impression de la feuille de soin,
- Les catalogues verres, montures et lentilles (import des catalogues et paramétrage des tarifs),
- Les commandes EDI (vérification de la connexion),
- La télétransmission (mise en place des identifiants, vérification de la connexion, paramètres),
- Le 100% santé (paramétrage des propositions par défaut),
- Les consentements RGPD,
- le groupement,
- etc.


Il est donc fortement recommandé de se reporter aux documentations accessibles dans l'onglet « infos pratiques » du site <http://winoptics.com/> pour finaliser le paramétrage de votre nouveau logiciel.


VIII. Installation du Winoptics2LocalService


Les périphériques, tels que les **imprimantes**, **scanners** et **lecteurs de carte vitale**, sont gérés à l'aide d'un utilitaire appelé WinOptics2LocalService (WO2LS).

L'activité de cet utilitaire est testée au lancement du logiciel. En son absence, vous pouvez le télécharger depuis le menu **Paramétrages** accessible via le bouton .


Allez dans le menu **Périphériques** : une alerte s'ouvre.

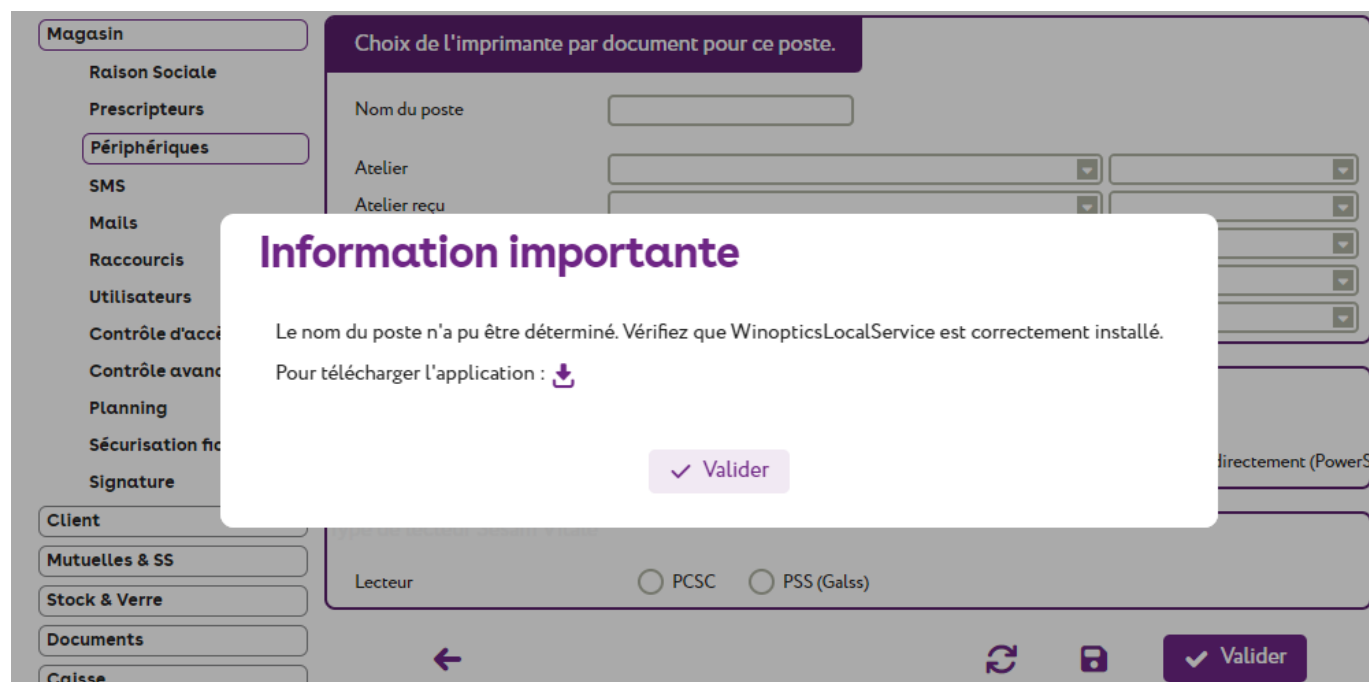


Cliquez sur le bouton  pour télécharger le fichier permettant l'installation.

Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation :  WinOptics2LocalService-installer.exe


Étape 1 : Choisissez la langue d'installation et cliquez sur « OK » :

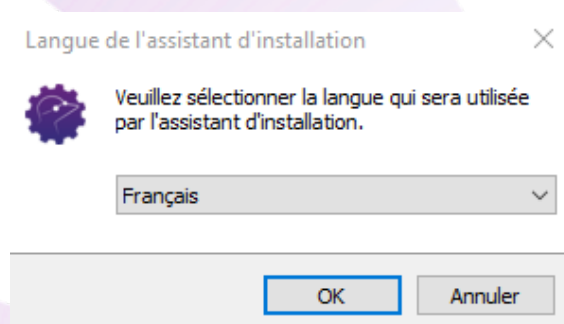


Étape 2 : Cliquez sur « Installer » pour lancer l'installation :

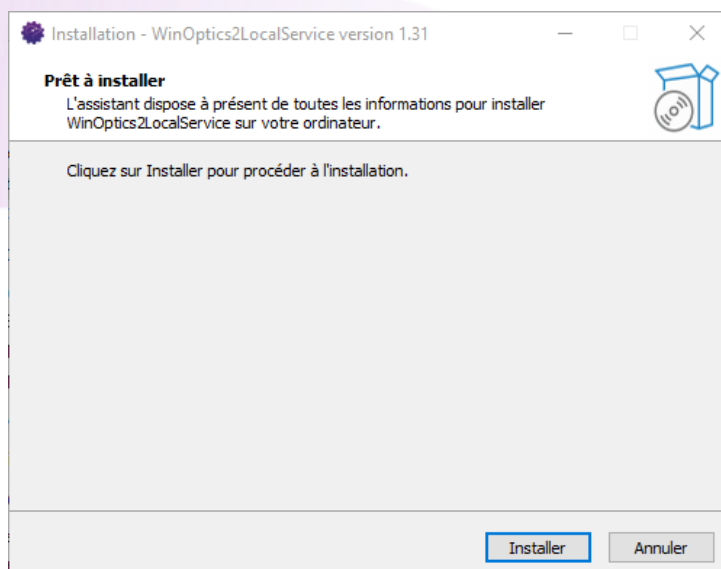

Étape 3 : Patientez quelques minutes pendant l'installation :

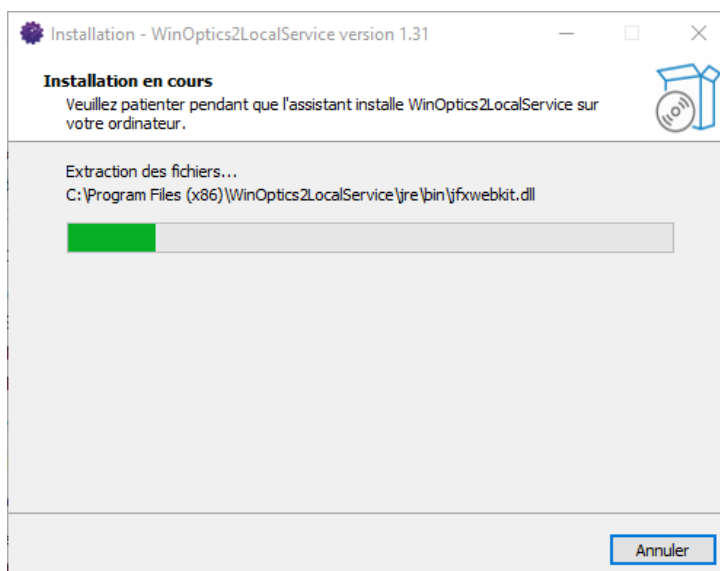

Étape 4 : Cliquez ensuite sur « Terminer » pour lancer l'application :

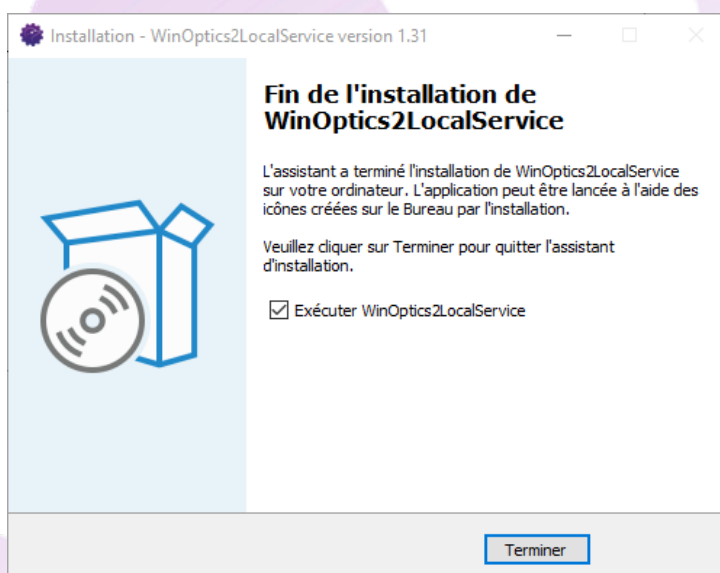

L'icône du WO2LS apparaît dans la barre des tâches Windows :

