

# Manuel d'utilisation Winoptics<sup>2</sup>

Interface Activisu

VERSION 1.2026.5

Winoptics



## SOMMAIRE


|             |                           |          |
|-------------|---------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>Avant installation</b> | <b>3</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Paramétrage</b>        | <b>3</b> |
| <b>III.</b> | <b>Utilisation</b>        | <b>4</b> |

## I. Avant installation

Avant l'installation dans Winoptics<sup>2</sup>, Activisu (IVS/Essilor) doit intervenir pour installer la borne et le mode de compatibilité avec Winoptics<sup>2</sup>.

## II. Paramétrage

Pour activer l'interface Activisu, cliquez sur [Paramètres](#) > [Interfaces](#) > [Activisu](#) :

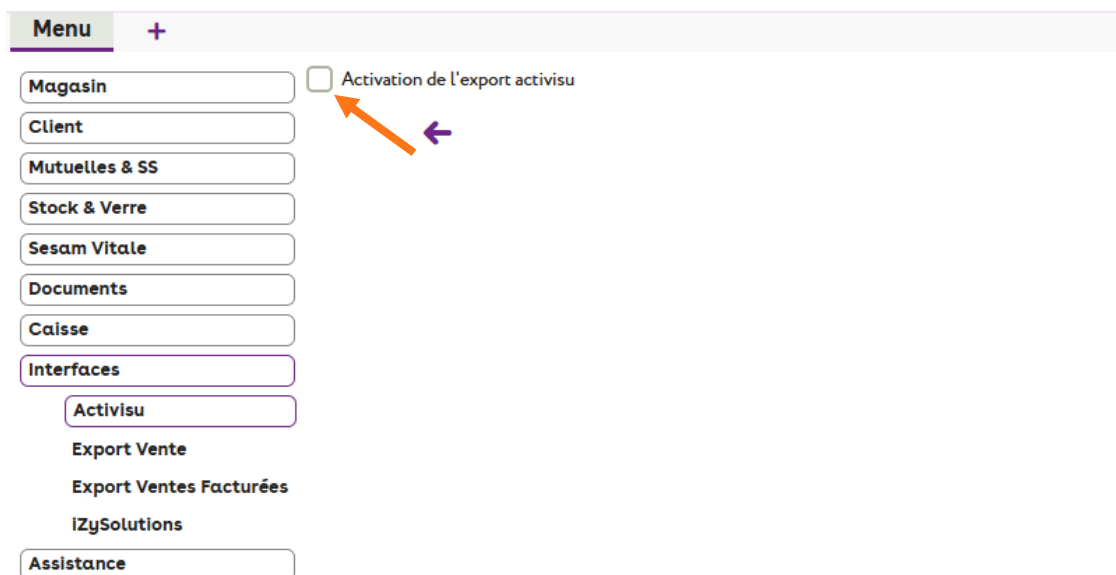

The screenshot shows a software menu with a 'Menu' header and a '+' icon. The menu items are: Magasin, Client, Mutuelles & SS, Stock & Verre, Sesam Vitale, Documents, Caisse, Interfaces (highlighted with a purple border), Export Vente, Export Ventes Facturées, iZySolutions, and Assistance. The 'Interfaces' section is expanded, showing 'Activisu' (highlighted with a purple border), 'Export Vente', 'Export Ventes Facturées', and 'iZySolutions'. To the right of the 'Activisu' item is a checkbox labeled 'Activation de l'export activisu'. An orange arrow points to this checkbox, and a purple arrow points to the 'Activisu' item.

Quand vous cochez la case, un message de confirmation s'affiche :



The dialog box has a title bar 'Activation de l'export' with a close button (X). The main text asks 'Souhaitez-vous activer l'export ?'. There are two buttons: a red button with a checkmark and the text 'Oui', and a purple button with an X and the text 'Non'.

Tous les chemins se mettent par défaut :

**Menu** +

- Magasin
- Client
- Mutuelles & SS
- Stock & Verre
- Sesam Vitale
- Documents
- Caisse
- Interfaces**
  - Activisu**
  - Export Vente
  - Export Ventes Facturées
  - IZySolutions
- Assistance

☒ Activation de l'export activisu

**Activisu**

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom réseau (ou adresse IP) du serveur Activisu                  | file:C:/ivs/completeData/oma/ |
| Nom du domaine réseau                                           | Nom du domaine réseau         |
| Utilisateur du domaine                                          | Utilisateur du domaine        |
| Mot de passe de l'utilisateur                                   | .....                         |
| Répertoire partagé d'entrée des flux OMA (Exemple : 'pms_in')   | in/                           |
| Répertoire partagé de sortie des flux OMA (Exemple : 'pms_out') | out/                          |
| Répertoire de l'application IVS (Exemple : 'c:/ivs/')           | c:/ivs/                       |

← ↻ 📁 ✓ Valider

### III. Utilisation

Une fois les verres et corrections renseignés sur votre équipement, vous pouvez cliquer sur le bouton  Activisu pour lancer la récupération.

**Monture**

|     |        |           |             |        |         |    |    |      |                 |
|-----|--------|-----------|-------------|--------|---------|----|----|------|-----------------|
| Réf | Modèle | Fabricant | Fournisseur | Marque | Coloris | Ca | Ni | Type | Prix vente 0,00 |
|-----|--------|-----------|-------------|--------|---------|----|----|------|-----------------|

**Œil Droit**

+1,00

Cyl

Axe

Add

Ac

Ø1/Ø2

Four

Type

Libellé Verre Œil Droit

0,00

**Œil Gauche**

+1,50

Cyl

Axe

Add

Ac

Ø1/Ø2

Four

Type

Libellé Verre Œil Gauche

0,00

Suppléments



(Aucun supplément sélectionné)

Suppléments


(Aucun supplément sélectionné)

Cela a pour but de lancer Visioffice X, Eyepartner, Expert 4 ou 5, etc..., c'est à dire le logiciel correspondant à la borne.


Exemple avec le logiciel Expert 4 d'Activisu qui se lance alors sur votre écran :

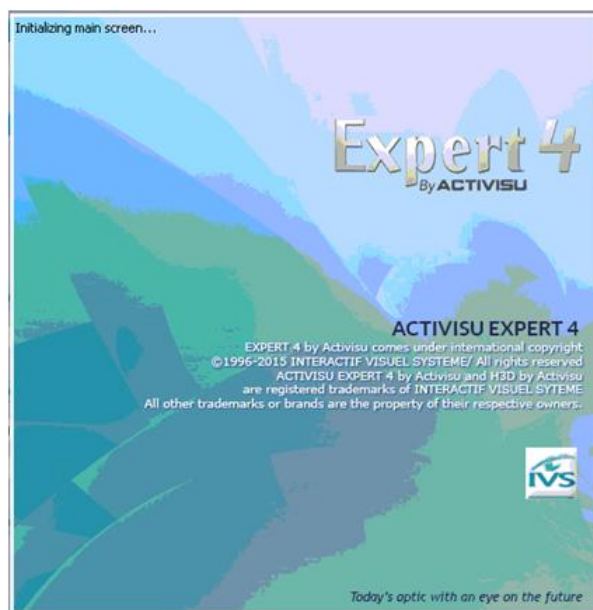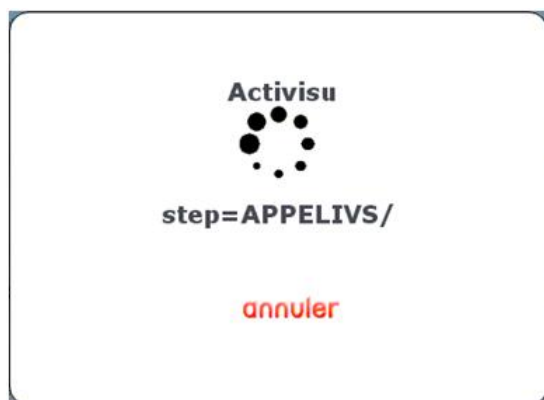

Sélectionnez la prise de mesure à importer nommée "No name XXX" par défaut, puis validez avec le bouton « Suivant ».

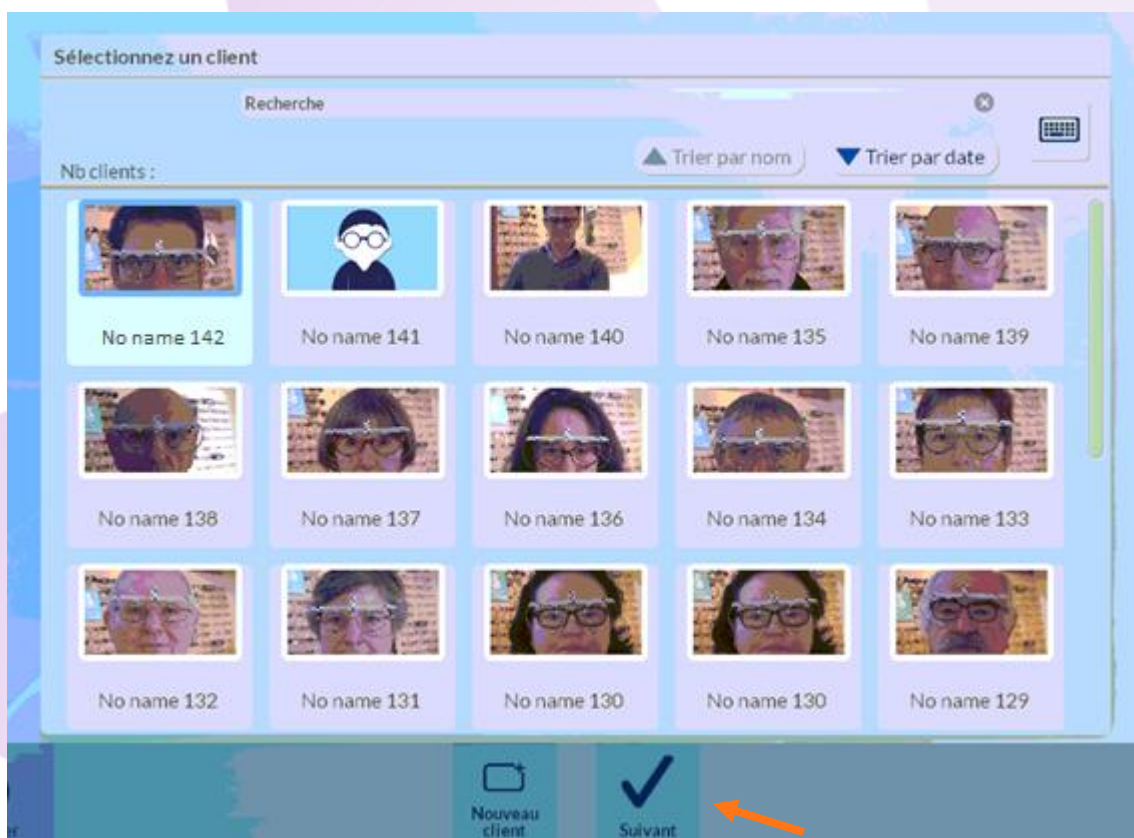


Sélectionnez l'équipement à importer, puis validez à nouveau avec « Suivant ».

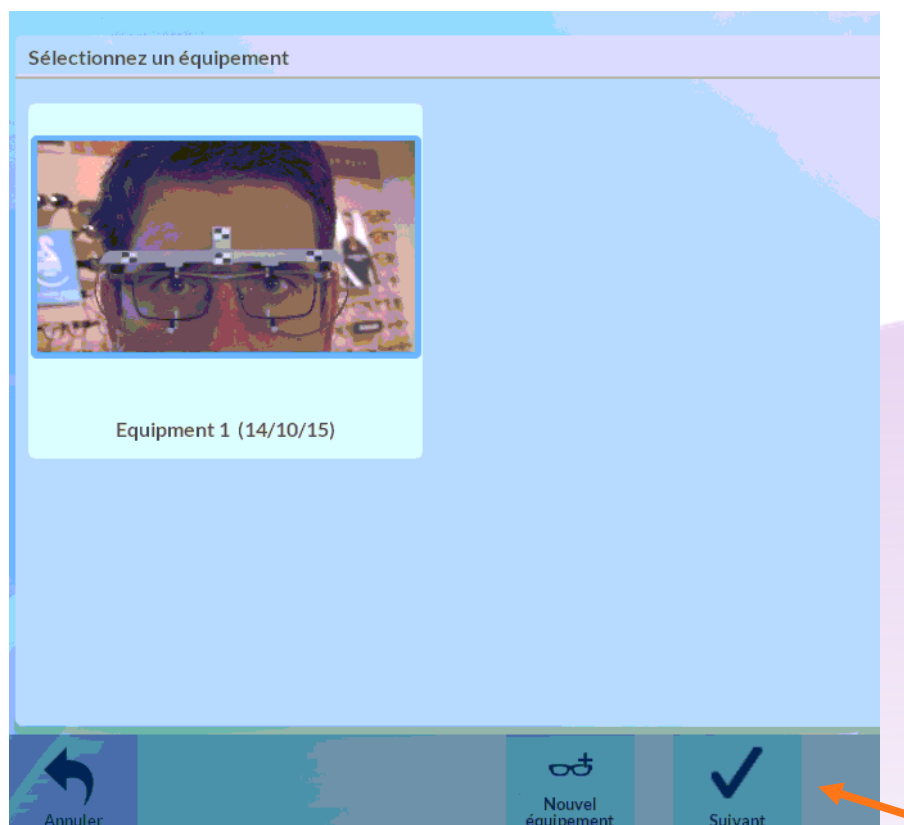

L'équipement sélectionné s'affichera et toutes les données dans Activisu seront mises à jour avec celles présentes dans Winoptics<sup>2</sup> (Nom, Prénom, Adresse, etc...).

Cliquez ensuite sur le bouton « Export ».

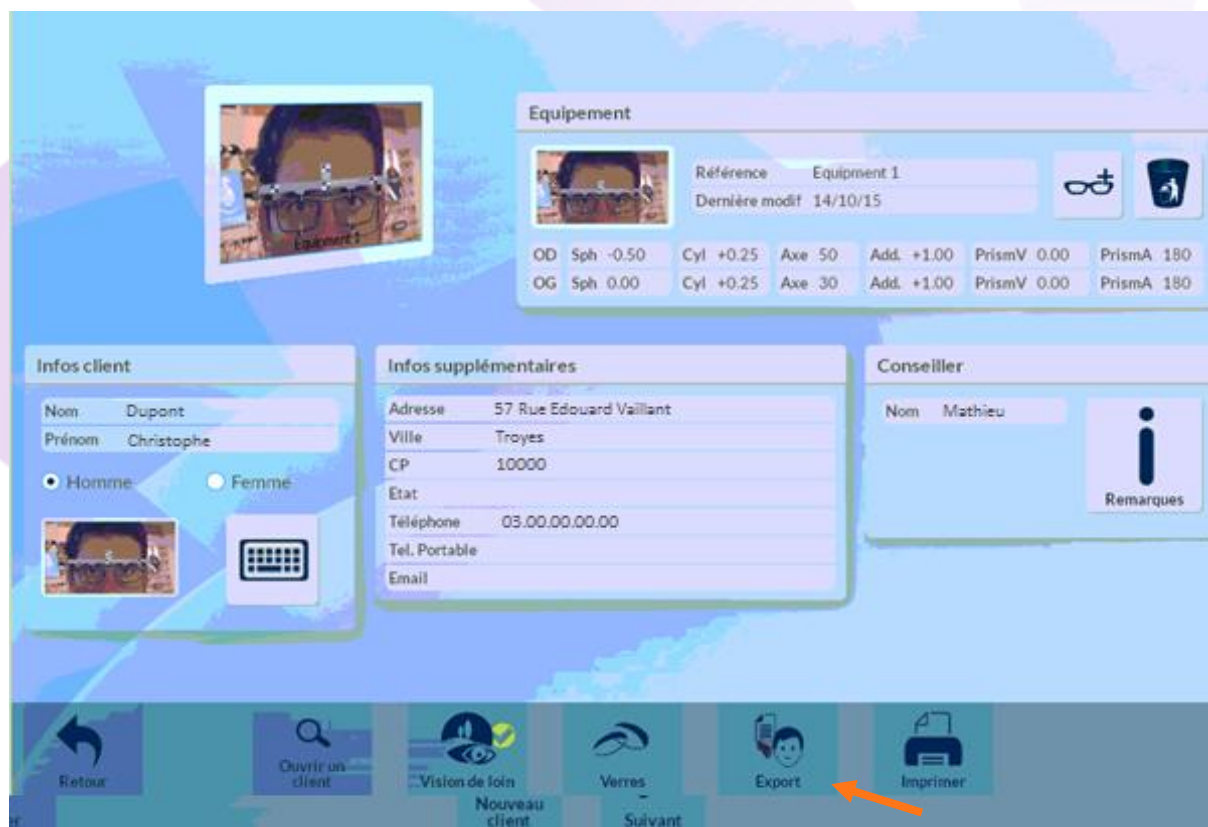

Cliquez sur le bouton WO2 :



Le logiciel Expert 4 d'Activisu sera alors réduit et les données seront automatiquement intégrées à votre fiche client : le champ PDM/VSM indique ensuite que la prise de mesure a été réalisée via Activisu.

A screenshot of the Activisu software interface. The top bar shows 'Équipement n°1296' and 'vendu par Vitale C'. Below this, there are several tabs: 'Type Équipement', 'Écarts & Hauteurs', 'Suivi & Traçabilité', and 'Observations'. The 'Suivi & Traçabilité' tab is active, showing a list of items with checkboxes. One item, 'PDM/VSM : Activisu', is highlighted with an orange arrow. Other items include 'Monture : A commander', 'Verres : Non commandés', 'Montage : Non planifié', and 'Liv. : Prévenir'. The bottom section shows 'Monture Stock' and 'Suppléments'.

Activisu n'est pas un logiciel de commande, il faudra commander sous Winoptics<sup>2</sup> une fois l'interface sollicitée.

Si vous avez en complément Opsysweb, vous pouvez envisager plusieurs modes de fonctionnement :

- Winoptics<sup>2</sup> -> Activisu -> Opsysweb : commande via Opsysweb
- Winoptics<sup>2</sup> -> Activisu -> Winoptics<sup>2</sup> -> Opsysweb : commande via Opsysweb
- Winoptics<sup>2</sup> -> Opsysweb -> Winoptics<sup>2</sup> -> Activisu : commande via Winoptics<sup>2</sup>